

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO	POP 58	Versão:01
Título do Documento	Troca de Bolsa de Ostomias Intestinais	Emissão:06/04/2026	Próxima revisão:06/04/2029

OBJETIVO(S)

Substituição de sistema coletor quando a placa estiver saturada ou com extravasamento de efluente. Padronizar as condutas de enfermagem para avaliação e cuidados com a pele periestomal em pessoas com ostomia, visando à manutenção da integridade cutânea, prevenção de complicações e promoção do conforto, segurança e qualidade da assistência.

RESPONSABILIDADE

Enfermeiro: Avaliar o estoma e a pele periestomal, indicar o dispositivo adequado, supervisionar a equipe e registrar intercorrências.

Técnico/Auxiliar de Enfermagem: Realizar o procedimento conforme prescrição e protocolo institucional, sob supervisão do enfermeiro.

DEFINIÇÕES

Ostomia: Abertura cirúrgica que exterioriza um órgão oco através da pele, podendo ser colostomia, ileostomia ou urostomia.

Pele periestomal: Área da pele ao redor do estoma que necessita proteção contínua contra efluentes e trauma mecânico.


MATERIAL



- Bolsa coletora adequada (uma peça ou duas peças)
- Placa/base adesiva (quando sistema de duas peças)
- Guia medidor de estoma (enviado junto com as bolsas)
- Tesoura
- Compressas ou gaze
- Soro Fisiológico
- Barreira protetora cutânea (se indicado)
- Pasta ou anel moldável (se indicado)

- Luvas de procedimento
- Saco para descarte de resíduos

DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS

1. Higienizar as mãos.
2. Explicar o procedimento ao paciente e proporcionar privacidade.
3. Reunir e organizar todo o material necessário.
4. Calçar luvas de procedimento.
5. Retirar cuidadosamente o dispositivo coletor antigo, descolando lentamente de cima para baixo, apoiando a pele.
6. Descartar o dispositivo em local apropriado, guardar o clamp para reutilização.
7. Manter uma gaze sobre o estoma para evitar drenagem de fezes;
8. Avaliar o estoma quanto a cor, formato, edema, sangramento e integridade.
9. Avaliar a pele periestomal quanto a hiperemia, lesões, dermatite ou umidade.
10. Realizar higiene do estoma e da pele ao redor com soro fisiológico e gaze ou compressa macia.
11. Secar cuidadosamente sem fricção.
12. Medir o diâmetro do estoma utilizando o guia medidor. Caso não tenha o guia, utilizar uma régua limpa ou fita métrica descartável para medir o maior diâmetro do estoma (em milímetros). Quando o estoma apresentar formato irregular ou ovalado, medir o maior comprimento e a maior largura. Transferir a medida obtida para o verso da placa/base adesiva e realizar o recorte manual. Se utilizar o equipamento de 1 peça, lembre-se de afastar o plástico da bolsa para não perfurá-la.

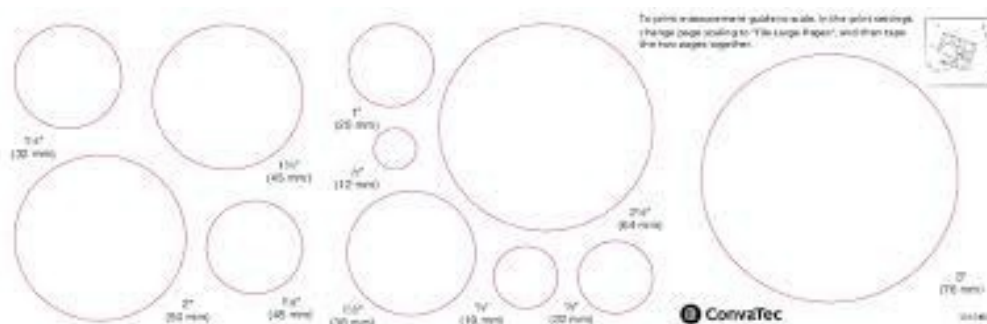

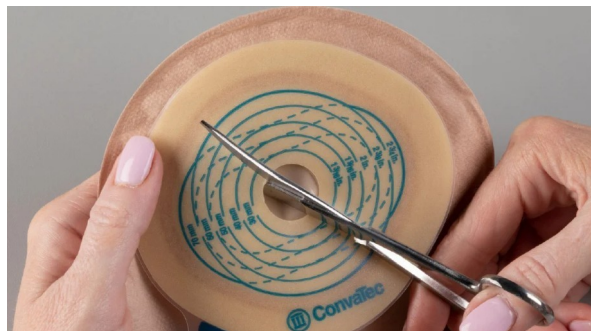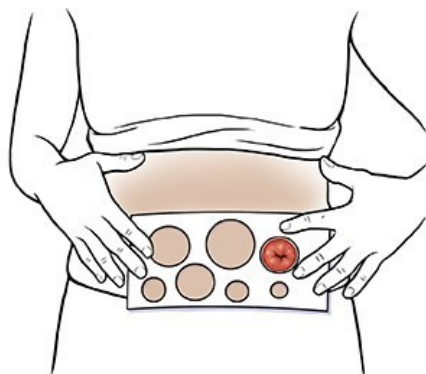


13. Recortar a placa/base com folga mínima de aproximadamente 1 a 2 mm maior que o estoma, para evitar lesões na pele, o ideal é que a pele ao redor não fique visível.
14. Se necessário, caso a pele apresente dermatite periestomal com hiperemia apenas, aplicar a película protetora e aguardar cerca de 30 segundos.
15. Caso o paciente apresente dobras de pele na região próxima ao estoma, deve-se aplicar a pasta de hidrocoloide nos locais de dobra, assim como ao redor do estoma e aguardar alguns segundos para que a pasta seque antes de aplicar a placa adesiva na pele, para melhor vedação.
16. Posicionar a placa/base centralizando no estoma e pressionar suavemente para fixação. Caso o paciente tenha um estoma plano ou retraído, deve ser usado uma placa adesiva convexa, para permitir que o efluente caia adequadamente na bolsa coletora e não vaze por baixo da placa adesiva. Se tiver que usar placa convexa, é obrigatório o uso de cinto fixador, para favorecer a protusão deste estoma;
17. No caso de bolsa de duas peças, colocar a bolsa coletora e aguardar fazer um “click”, para fechá-la adequadamente
18. Fechar a extremidade da bolsa, enrolando esta parte e usando o clampe/presilha da bolsa, garantir boa vedação e conforto do paciente.
19. Liberar o paciente;
20. Retirar luvas e higienizar as mãos.
21. Realizar registro em prontuário.
22. Modelo de evolução de enfermagem na avaliação de estomas:

Paciente admitido para avaliação de estoma. Ao exame, apresenta estoma do tipo _____ (colostomia/ileostomia/urostomia/gastrostomia/outro), localizado em _____(quadrante).

Estoma com formato _____(circular/oval/irregular), coloração _____ (rosado, vermelho vivo, pálido, cianótico), superfície ____ (úmida/brilhante/seca), protrusão aproximada de _____cm. Ausência/presença de sangramento ao toque. Pele periestomal apresentando-se _____(íntegra/hiperemiada/macerada/lesão dermatológica/outro), sem/com sinais de irritação ou dermatite associada ao estoma. Efluente com características _____ (líquido/pastoso/formado), coloração _____ e volume aproximado _____. Dispositivo coletor avaliado, apresentando boa/regular/baixa adesividade. Re- alizada troca/manutenção do equipamento coletor conforme necessidade. Realizadas ori- entações ao paciente/acompanhante quanto aos cuidados com o estoma, higiene da re- gião, troca do dispositivo coletor e observação de sinais de complicações (dor, alteração de coloração do estoma, sangramento persistente, lesões periestomais).

Localização anatômica das ostomias intestinais (abertura cirúrgica)

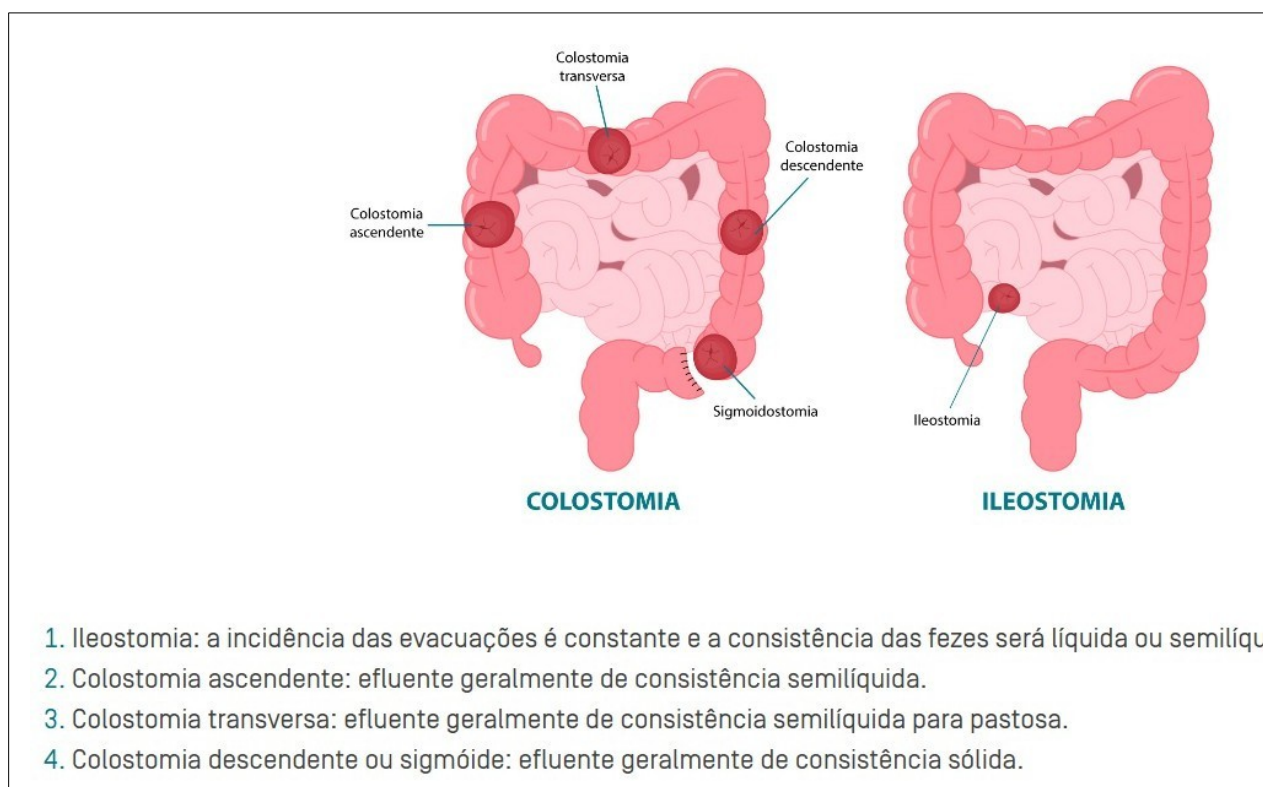

1. Ileostomia: a incidência das evacuações é constante e a consistência das fezes será líquida ou semilíquida.
2. Colostomia ascendente: efluente geralmente de consistência semilíquida.
3. Colostomia transversa: efluente geralmente de consistência semilíquida para pastosa.
4. Colostomia descendente ou sigmóide: efluente geralmente de consistência sólida.

Para melhor compreensão quanto as técnicas de avaliação, materiais e indicações de uso, recomendamos a leitura do manual do estado “**INSUMOS ESTOMIAS INTESTINAIS E URINÁRIAS SES**”. Disponível em:

<file:///C:/Users/viviane.vantzen/Downloads/Insumos%20estomias%20intestinais%20e%20urinarias%202025%20Corrigido.pdf>.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). **Cuidados com ostomias intestinais e urinárias - Orientação ao usuário**. 2 a edição. Rio de Janeiro: INCA, 2018. Disponível em: <<https://www.inca.gov.br/sites/ufu.sti.inca.local/files//media/document//livro-cuidados-com-asua-estomia.pdf>>. Acesso em: 20/02/2026

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção Especializada em Saúde. Departamento de Atenção Especializada e Temática. **Guia de atenção à saúde da pessoa com estomia** / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, Departamento de Atenção Especializada e Temática. – Brasília : Ministério da Saúde, 2021.

STEFFENS, Edina; SPANHOL, Fabiele Carloto; GALINA, Tauane; SCHNEIDER, Camile Ronsoni; MINGOTTI, Catia Regina; SILVA, Francieli Alves da; NOGARO, Arnaldo; CASTANHO, Alison Roberto. **Guia para ostomizados: cuidando da sua saúde e confiança**. Erechim, RS: Edifapes, 2024. Recurso eletrônico. ISBN 978-65-88528-70-9. Disponível em: <https://uricer.edu.br/cursos/arq_trabalhos_usuario/5092.pdf>. Acesso em: 20/02/2026.

HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Elaboração: Viviane Strapasson Vantzen, Enfermeira	Data: 20/02/2026
Revisão Grazielle dos Santos, ERT	Data: 20/02/2026
Validação e Aprovação Grazielle dos Santos, ERT	Data: 20/02/2026





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3141-07A5-861B-0996

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GRAZIELLE DOS SANTOS (CPF 047.XXX.XXX-47) em 06/04/2026 11:18:03 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ VIVIANE STRAPASSON VANTZEN (CPF 066.XXX.XXX-78) em 07/04/2026 13:39:17 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Esta versão de verificação foi gerada em 07/04/2026 às 13:39 e assinada digitalmente pela MUNICIPIO DE BRUSQUE:83102343000194 para garantir sua autenticidade e inviolabilidade com o documento que foi assinado pelas partes através da plataforma 1Doc, que poderá ser conferido por meio do seguinte link:

<https://brusque.1doc.com.br/verificacao/3141-07A5-861B-0996>